

# Illico

Cama eléctrica  
geriátrica



**VERMEIREN**  
we care for you

# Illico

## Comfortable y práctica

- Ajuste de altura del somier entre 298 mm y 828 mm
- Ajustable eléctricamente con el mando incluido
- Ajuste reclinación eléctrico
- Ajuste de rodillas eléctrico, la parte de los pies puede ajustarse manualmente
- Colchones entre 1900 mm y 2000 mm x 900 mm
- Mando con función de bloqueo
- Carga máxima 170 kg (paciente y colchón)
- Par de barandillas
- El dispositivo de auto-elevación puede colocarse a la derecha o a la izquierda
- Las 4 ruedas pueden frenarse independientemente
- Elegantes paneles de madera delanteros y traseros
- Fácil (des)montaje
- Disponible kit de transporte




Mando con funciones de bloqueo



Paneles fácilmente extraíbles



Ruedas de diseño robusto con bloqueo

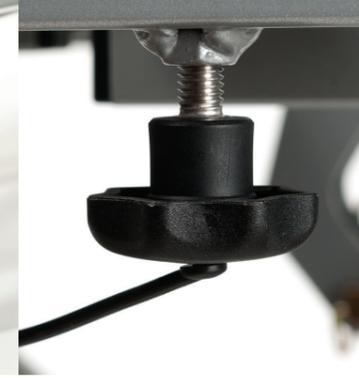

Desmontaje de fácil acceso



Kit de transporte sobre ruedas para un almacenamiento sin problemas



Se puede desmontar el armazón de la cama sin herramientas adicionales



El incorporador se puede colocar en el lado izquierdo o derecho de la cama. La correa se puede ajustar a la longitud deseada.



4 posicionadores de colchones (2 en el parte de la cabeza y dos en la parte del pie) Mantienen el colchón en el lugar correcto.

Una pulsación en el botón libera los carriles laterales.



El mando dispone de un cable suficientemente largo para ponerlo donde quiera de la cama.

La parte de los pies puede elevarse manualmente en varias posiciones.



## Montaje ultra FÁCIL sin herramientas

No busque destornilladores o llaves allen con nuestra cama Illico. Una sola persona para montar o desmontar esta cama en cuestión de minutos. Retire el lado de los rieles, tablas de madera, desconecte la cama del marco y todo listo.



## Diferentes paneles, diferentes barandillas

Para conjuntar con el interior, Illico puede traer paneles de roble o haya.



El lecho está disponible en **ABS** para facilitar su desinfección.



## Información técnica

Ancho total	1024 mm
Altura total	783 - 1313 mm
Altura total	2080 mm
Altura del marco del colchón	298 - 828 mm
Ángulo máximo para la parte superior del cuerpo	70°
Ángulo máximo para la parte superior de las piernas	36,8°

## Barandillas partidas

Nuestras camas Illico también están disponibles con barandillas partidas, metálicas o en madera, dependiendo de la configuración escogida.



## Productos diseñados a medida

**VERMEIREN** siempre se esfuerza por encontrar la mejor solución disponible para cubrir sus necesidades personales. A medida que avanza la tecnología, nosotros también y, como tal, podemos ofrecerle los productos más actualizados. Este es el resultado de nuestra continua investigación y experiencia desde 1957.

## Calidad garantizada

En cuanto a la calidad, **Illico** cumple con las más altas normas, establecidas por institutos de pruebas certificados de renombre mundial.

Ángulo máximo para la parte inferior de las piernas	-17,2°
Colchón	RG 35, espesor 120 mm, 2000x900 mm
Carga nominal pértiga de elevación	75 kg
Peso	85 kg
Peso máximo del usuario	135 kg
Información adicional	CE

Desviaciones en peso y medidas (1,5 mm y 1,5 kgs) son posibles  
Imágenes para fines ilustrativos. Algunas características pueden ser opcionales.

## VERMEIREN Ibérica, S.L.U.

Carretera de Cartellà, Km. 0,5  
Sant Gregori Parc Industrial - Edifici A  
17150 Sant Gregori (Girona)

[www.vermeiren.es](http://www.vermeiren.es)  
[info@vermeiren.es](mailto:info@vermeiren.es)



Para más información contacte con su distribuidor local.