




TriGO<sup>o</sup>



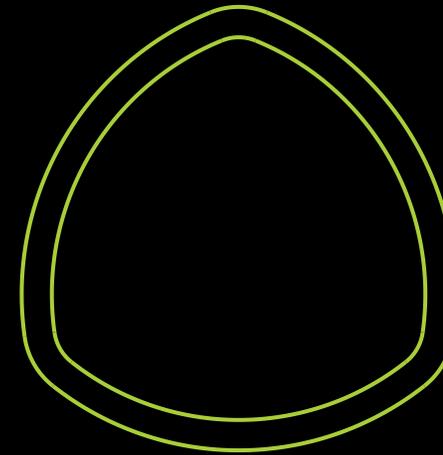

## ¿Por qué tubos triangulares?

Nuestros equipos de investigación y desarrollo han perfeccionado los tubos triangulares que son la base de tu **Trigo**. Ventajas de la sección triangular de los tubos:

- Mayor rigidez y estabilidad
- Ligereza
- Indeformable

Además de una estética moderna y exclusiva.

# TRIGO S



Nuestra silla de ruedas está disponible en dos versiones. La **Trigo S**, una silla activa y plegable con reposapiés integrados en el chasis. El diseño de la Trigo S es activo y deportivo. Esta configuración hace la silla incluso más ligera, manteniendo la máxima resistencia.





# TRIGO T



La **Trigo T** ha sido diseñada con el mismo look moderno. El chasis plegable dispone de reposapiés extraíbles y abatibles. Su diseño la hace ideal para el transporte.

## DISEÑO

**VERMEIREN** ha diseñado **Trigo** como una silla ultramoderna para satisfacer el gusto de todos. Además, tu Trigo puede personalizarse al pedirla, del chasis a las ruedas, incluyendo una amplia gama de reposabrazos y entre un rango de 30 colores posibles. ¡Hay tantas Trigo diferentes como usuarios!





## INFINITAMENTE AJUSTABLE

Aparte de las configuraciones al realizar el pedido (tamaño, tipos de respaldo, reposabrazos, chasis, opciones,...) tu **Trigo** sigue siendo una silla dinámica. De hecho, un gran número de ajustes están disponibles directamente en la silla, como la inclinación de ruedas, altura de asiento, etc.



## INCLINACIÓN DE RUEDAS AJUSTABLE EN CADA SILLA DE RUEDAS

Gracias a un ingenioso sistema, ¡puedes cambiar la inclinación de las ruedas directamente en tu silla! El «camber» puede ajustarse a la posición deseada de 0°, 2°, 4° o 6° (dependiendo de la configuración). Tu **Trigo** será suministrada con el ángulo que hayas pedido.





## REGLAJE DE LA POSICIÓN DE LAS RUEDAS

Para adaptar la **Trigo** al usuario y hacerla más o menos «activa», la posición de las ruedas traseras puede ser ajustada directamente en el chasis de tu silla.

Las ruedas traseras se pueden ajustar hacia adelante o hacia atrás en 8 posiciones diferentes.

Te entregaremos tu Trigo con las ruedas en la posición que hayas escogido.



## INCLINACIÓN DEL RESPALDO

Hay 3 posibles respaldos para **Trigo**: fijo, reclinable y reclinable y plegable. Para los dos últimos, la inclinación del respaldo se ajusta fácilmente.








## DISPONIBLE EN TALLAS INFANTILES

La **Trigo** ha sido diseñada de tal manera que es adecuada para adultos y también para niños. Por esta razón, Trigo está disponible en tallas de asiento desde 30 cm hasta 50 cm. Incluso para las tallas más pequeñas, existe una amplia gama de accesorios y opciones disponibles.



# OPCIONES

## EMPUÑADURAS

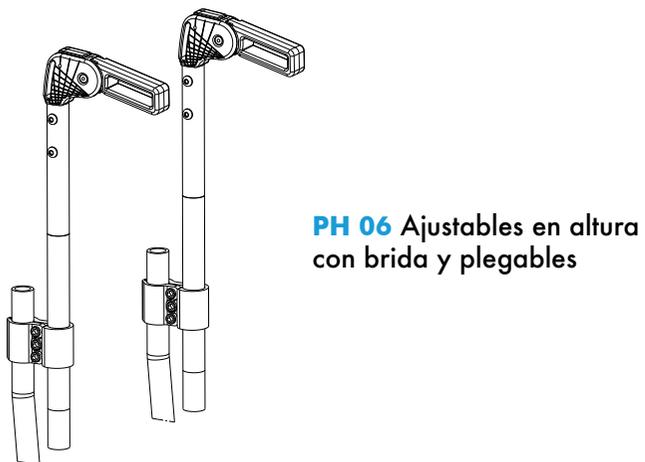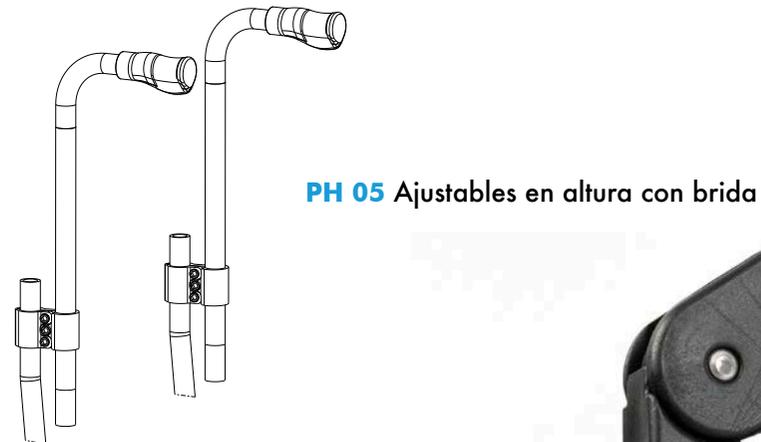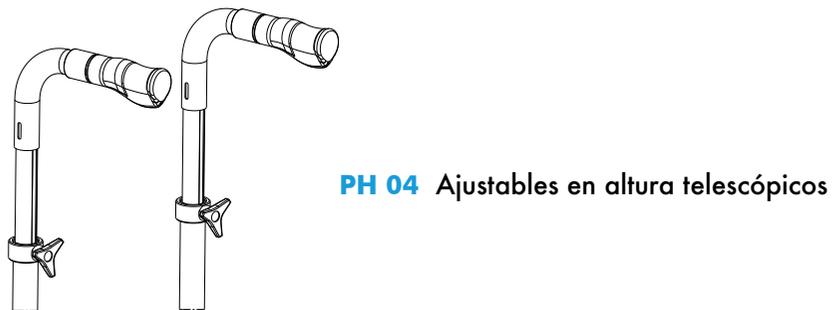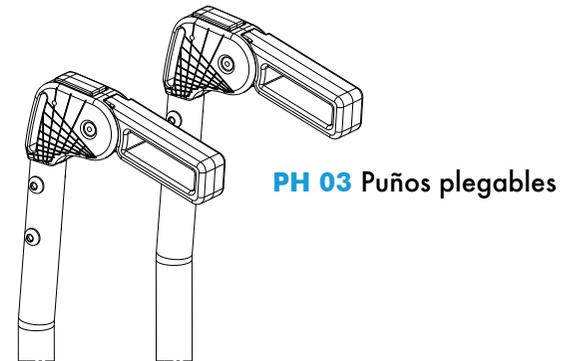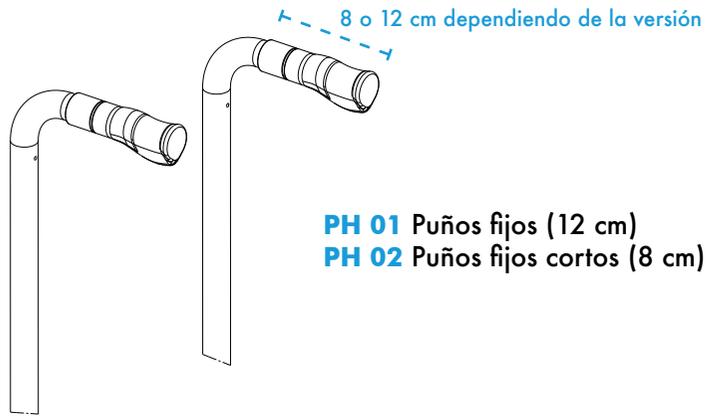


Las empuñaduras **PH 03** y **PH 06** son abatibles.




# OPCIONES


## REPOSABRAZOS Y PROTECTORES DE ROPA

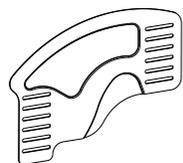


**B82-S o B82-C**  
Protectores de ropa fijos, regulables, en aluminio o carbono

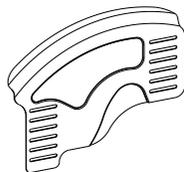


**B82**  
Protectores de ropa fijos, regulables, en aluminio con anti-salpicaduras

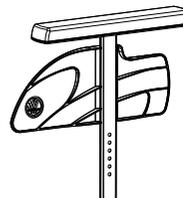

**Bi5**  
Reposabrazos regulables y ajustables en altura

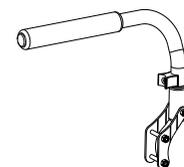

Reposabrazos **TUBE**, abatibles (solo con respaldo fijo)

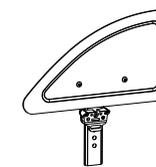


**B82S-A**  
Protectores de ropa extraíbles y ajustables en aluminio




**B82SL-A**  
Protectores de ropa largos, extraíbles, en aluminio




**B82L-A**  
Protectores de ropa largos, extraíbles y ajustables, en aluminio

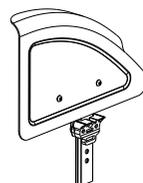

**B82-A**  
Protector de ropa extraíble y ajustable, con anti-salpicaduras, en aluminio

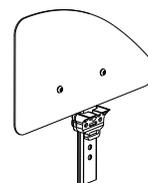


**B82S-C**  
Protectores de ropa ajustables y extraíbles, en carbono

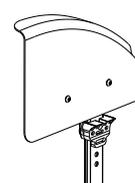


**B82-C**  
Protectores de ropa largos, extraíbles y ajustables, con anti-salpicaduras en carbono


Disponibles en ángulos de: 70°, 80° y 90°

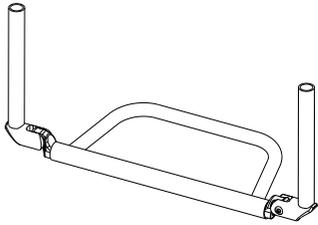


Tubo monoblock en aluminio

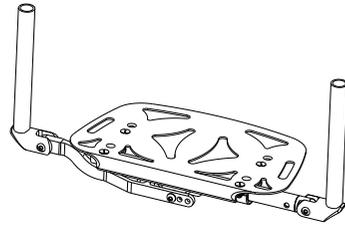


Reposapiés monoblock en aluminio plegable

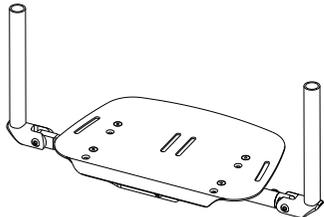


Reposapiés monoblock plegable en carbono

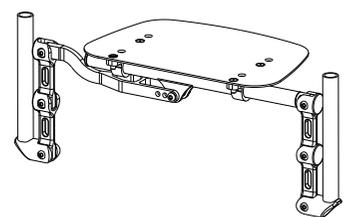

Monoblock con reposapiés más alto

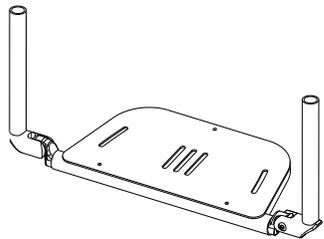

Monoblock con paleta retráctil

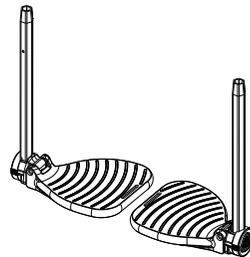


Reposapiés separados




 **TRIGO S**

# OPCIONES


## REPOSAPIÉS

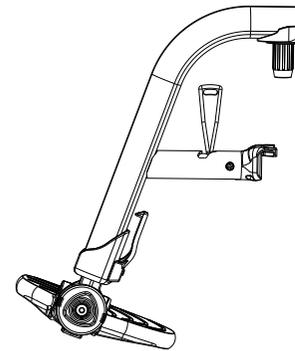


70°

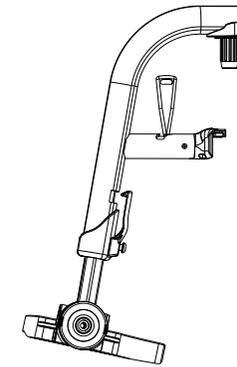

80°

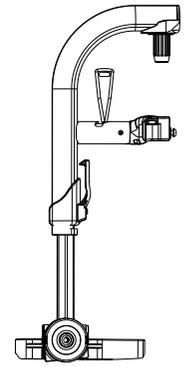

90°

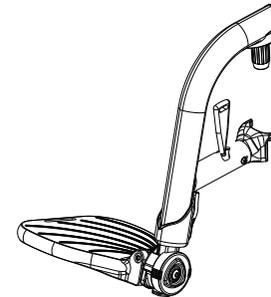

BA6 reposapiés 5 cm más cortos



 **TRIGO T**

# OPCIONES

## RUEDAS

### Ruedas delanteras



**Estándar negro**  
3", 4", 5", 6"



**Transparentes**  
3", 4", 5", 6"



**Aluminio plata**  
3", 4", 5"



**Aluminio azul**  
3", 4", 5"



**Aluminio rojo**  
3", 4", 5"



**Carbono**  
4", 5"



**LED**  
4", 5"

### Ruedas traseras



**Ruedas estándar 18"**  
18"



**Ruedas de diseño**  
20", 22", 24", 26"



**Ruedas Spirit aluminio**  
24"



**Ruedas Spirit rojo**  
24"



**Ruedas Spirit azul**  
24"



**Ruedas Off-road**  
24"



**Neumáticos negros Right Run**  
disponibles con ruedas  
Design y Spirit



**Neumáticos Marathon Plus**  
disponibles con ruedas  
Design y Spirit

Unidad de medida: pulgadas

# OPCIONES


## FRENOS



Freno de tiro o empuje




Frenos deportivos

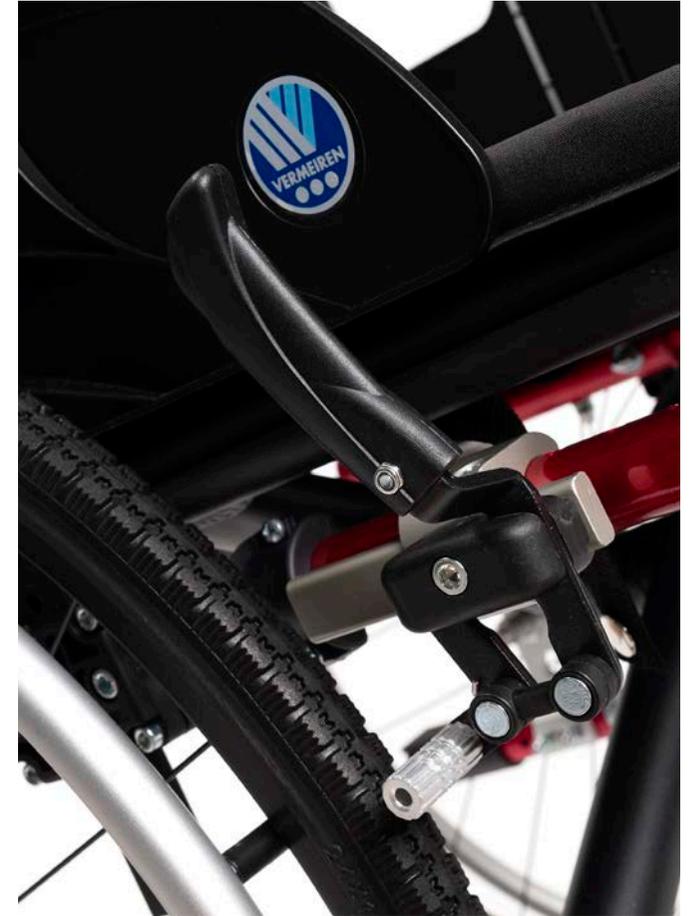


Frenos tradicionales con manijas retráctiles (B40)

# OPCIONES


## OPCIONES Y ACCESORIOS

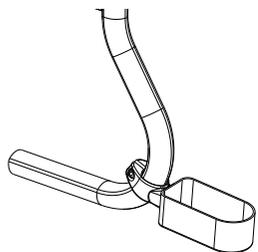


**Porta-bastones  
izquierdo o derecho**  
B31L o B31R

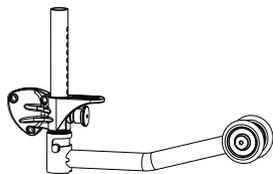

**Rueda anti-vuelco  
izquierda o derecha**  
B78L o B78R

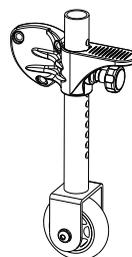


**Ruedas  
tránsito**  
B86

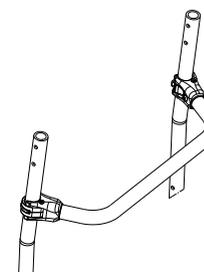


**Barra estabilizadora  
respaldo**  
B90



**Cinturones Neoflex**  
Consulte todas las soluciones  
posibles en nuestro sitio web  
[www.vermeiren.es](http://www.vermeiren.es)

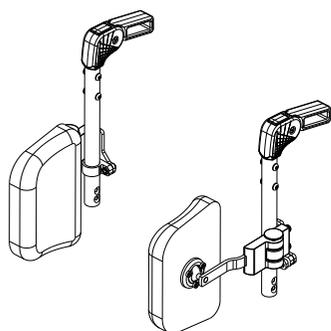

**Controles laterales izquierdo  
o derecho (largos)**  
L04 L o L04 R

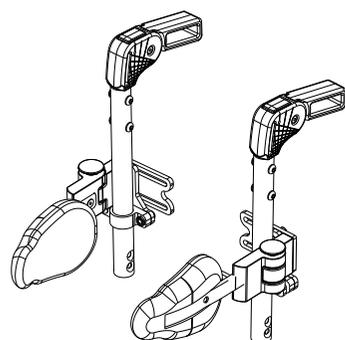

**Controles laterales izquierdo  
o derecho (cortos)**  
L04S L o L04S R



**Frenos de tambor**  
ruedas grises  
24" x 1/3 8"

**Protectores de radios**  
Consulte todos los modelos  
posibles en nuestro sitio  
web [www.vermeiren.es](http://www.vermeiren.es)

**Más opciones y accesorios en nuestra hoja de pedido.**

# MÚLTIPLES OPCIONES DE COLOR



**C4M - Rojo mate**  
**C4G - Rojo brillante**



**C5M - Negro mate**  
**C5G - Negro brillante**



**C8M - Amarillo mate**  
**C8G - Amarillo brillante**



**C29M - Plateado mate**  
**C29G - Plateado brillante**



**C53M - Naranja mate**  
**C53G - Naranja brillante**



**C55M - Inox mate**  
**C55G - Inox brillante**



**C56M - Azul metálico mate**  
**C56G - Azul metálico brillante**



**C59M - Champagne mate**  
**C59G - Champagne brillante**



**C71G - Azul oscuro brillante**




**C72G - Rojo metálico brillante**



**C73G - Verde metálico brillante**



**C76M - Blanco mate**  
**C76G - Blanco brillante**

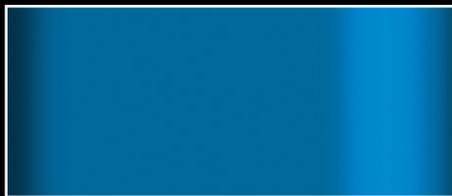

**C78G - Azul suave brillante**



**C79M - Azul claro mate**  
**C79G - Azul claro brillante**



**C85M - Verde mate**  
**C85G - Verde brillante**



**C87M - Azafrán mate**  
**C87G - Azafrán brillante**



**C88M - Oro mate**  
**C88G - Oro brillante**



**C89M - Cobre mate**  
**C89G - Cobre brillante**



**Y docenas de colores distintos bajo pedido (consultar precio)**

# DATOS TÉCNICOS



Ancho de asiento : **de 30 a 50 cm** (cada 2 cm)

Largo total (camber 0°) : **de 46 a 66 cm**

Profundidad de asiento : **de 30 a 50 cm** (cada 2 cm)

Altura de asiento : **de 38 a 51 cm** (dependiendo de la configuración)

Peso total : **a partir de 10 kg** (dependiendo de la configuración)

Peso máximo usuario : **70 o 130kg** (dependiendo de la configuración)

Posibilidad de respaldo abatible : **si**

Altura de respaldo : **de 25 a 51 cm** (dependiendo de la configuración)

Ruedas delanteras : **3", 4", 5", 6"**

Tamaño rueda trasera : **18", 20", 22", 24", 26"**

Ángulo caída de ruedas : **de 0° a 6°** (ajustable directamente en la silla)

Tapicería disponible: **Nylon, Cordura, Airflow**

Dimensiones en cm, peso en kg. Tolerancia de medidas: 1,5 cm, 1,5kg, 1,5°

# NOTAS

## VERMEIREN

### VERMEIREN Ibérica SLU

Carretera de Cartellà, Km. 0,5  
Sant Gregori Parc Industrial - Edifici A  
17150 Sant Gregori (Girona)

Tel.: +34 972 428 433

Fax: +34 972 42 92 39

@ : info@vermeiren.es

[www.vermeiren.es](http://www.vermeiren.es)

---

---

---

---

---

---

---

---

Para más información,  
contactar con su distribuidor habitual.

Todos los derechos reservados, incluidos los de la traducción. • Se prohíbe la reproducción total o parcial del presente manual de cualquier forma (impresión, fotocopia, microfilm o cualquier otro procedimiento), así como la edición, copia o distribución empleando sistemas electrónicos, sin el permiso escrito del editor.

Edición: marzo de 2020.

Imágenes sólo con fines de ilustración. Algunas de las funciones pueden ser opcionales. Sujeto a modificaciones técnica.

Visite nuestro sitio web para obtener la información más actualizada: [www.vermeiren.es](http://www.vermeiren.es)

TriGO<sup>o</sup>